



SOT

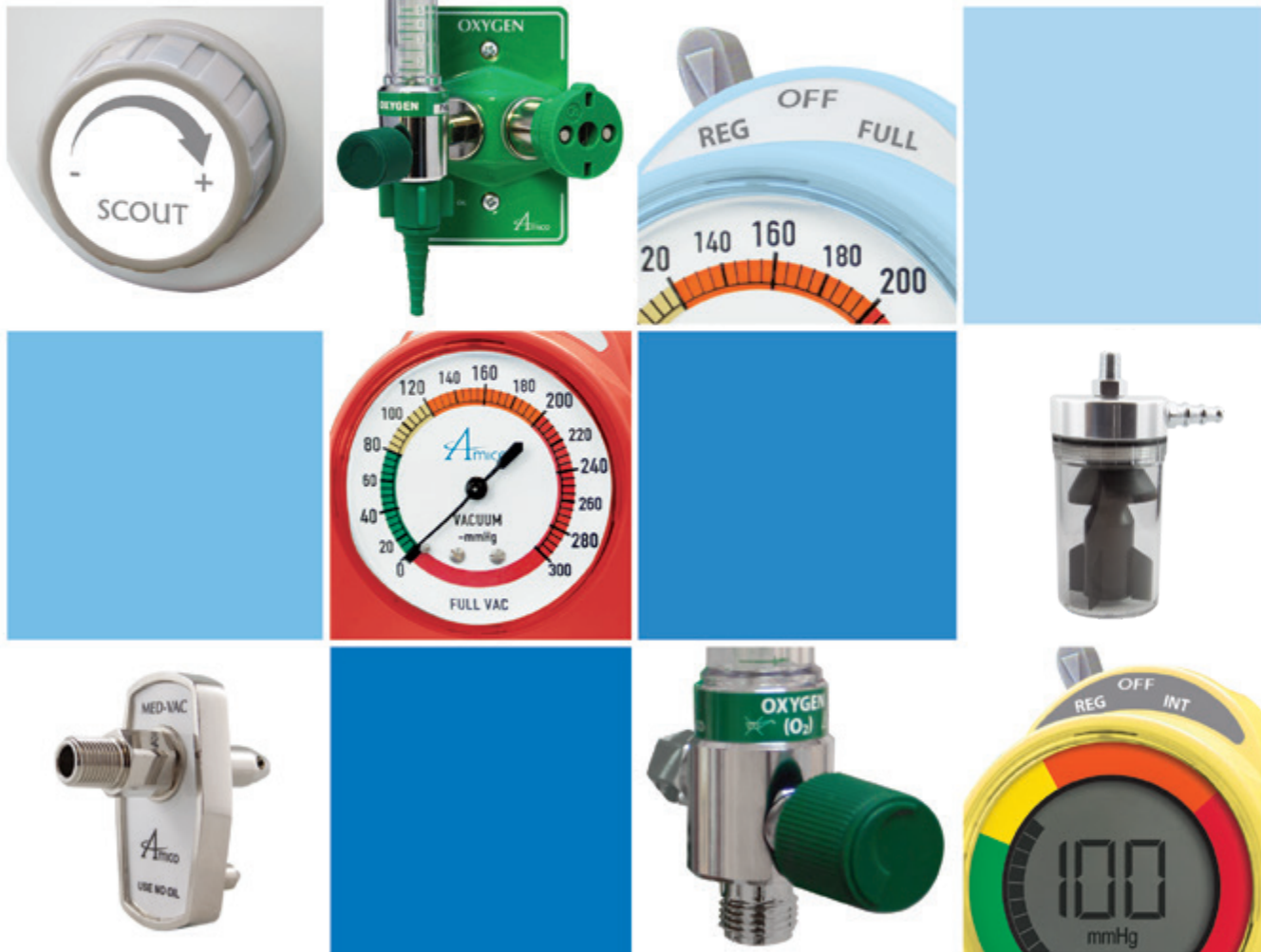

Equipos de Succión y Oxigenoterapia

Regulador de Vacío

5 AÑOS
de garantía

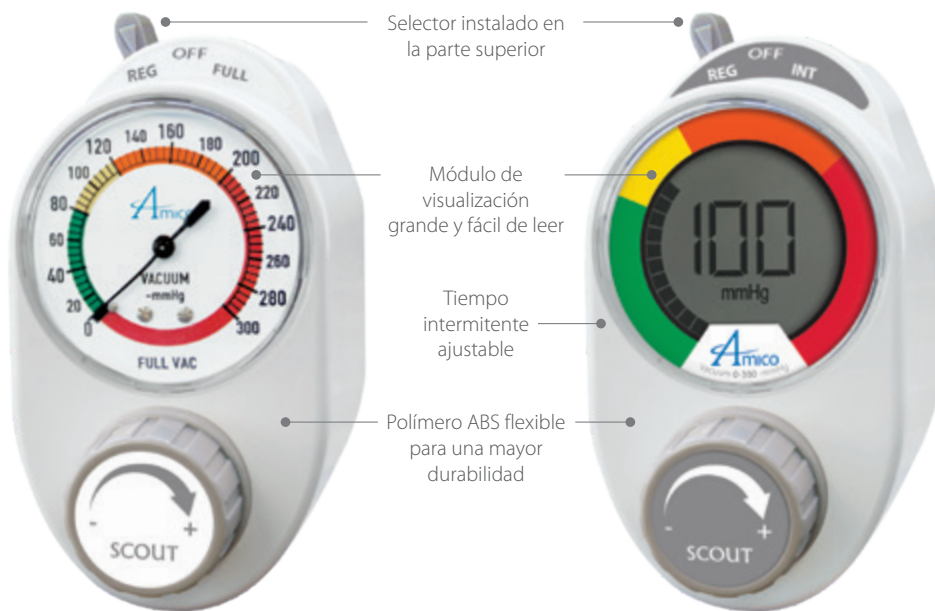

Análogo

Digital

Características:

- Es la unidad más pequeña y liviana del mercado: 10 oz (290 g)
- Cubierta de polímero ABS: resistente a los impactos y de mayor duración
- La secuencia puede ser programada por el usuario desde la parte trasera de la unidad
- Calibradores con codificación por color, fáciles de leer
- Garantía de 5 años
- Es la única unidad en el mercado que cuenta con una parte trasera transparente desechable
- Diseño con funciones para el control de infecciones
- Se puede invertir el flujo
- Componente desechable para una limpieza más fácil

Opciones de Codificación por Color



➡ Facilita la gestión del inventario

- Por departamento:
 - Departamento de emergencias (ED)
 - Departamento pediátrico
 - Unidad de cuidados intensivos (UCI)

➡ Facilita la identificación del modelo

- Por modelo:
 - Continuo alto/quirúrgico
 - Departamento pediátrico
 - Continuo/intermitente
 - Neonatal

Identificar la Contaminación de Forma Instantánea

¿Sabía que...?

PATENTE PENDIENTE

NUEVO
Parte Trasera
Transparente

Nueva
Medida para
Controlar
Infecciones



Remueva de la salida e
identifique la contaminación
de inmediato

En un estudio realizado en julio de 2010, titulado **Suction Regulators: A Potential Vector for Hospital-Acquired Pathogens**, se determinaron los siguientes resultados:

- El **37% de los reguladores** que se encuentran en un hospital están **contaminados**
- Estos contaminantes incluyen el "crecimiento de patógenos nosocomiales bien establecidos" **que causan infecciones intrahospitalarias (HAI)**
- Los contaminantes **se expanden desde un regulador al recipiente de pared lateral, y de regreso a un estómago simulado del paciente dentro de 24 horas**
- No existe una verificación obligatoria o un programa de mantenimiento preventivo para determinar si la contaminación está presente

El cuerpo trasero reemplazable de Amico permite a los usuarios **disponer de forma segura de la parte contaminada** del regulador y **reemplazarlo con nuevos** componentes estériles por una fracción del costo.

Suction Regulators: A Potential Vector for Hospital Acquired Pathogens by Keith S. Kaye, MD, MPH; Dror Marchaim, MD; Chester Smialowicz, MD; Lauren Bentley, MSBME

Con la **Parte Trasera Transparente** de Amico y el cuerpo desechable, se puede detectar la contaminación y tener un nuevo regulador en 3 sencillos pasos :

¿Su regulador está contaminado?

Cubierta desechable



Parte delantera

Parte trasera

Paso 1:



Paso 2:



Paso 3: Vuelva a armarlo con solo 1 NUEVO componente



Modelos Continuo - Etiquetas Blancas

Continuo, 3 Modos



SRA-C3U2-F2

Continuo, 2 Modos



SRA-C2U2-F2

Pediátrico, 2 Modos



SRA-P2U2-F2

Neonatal, 2 Modos



SRA-N2U2-F2

Continuo Alto/Quirúrgico



SRA-CHU2-F2

Los reguladores tipo continuo de Amico ofrecen funciones únicas para garantizar procedimientos de succión correctos y ayudar a mejorar las prácticas médicas.

- Los modelos para adulto regulan a 300 mmHg y, a máxima succión, proporcionan una presión máxima de las tomas de corriente.
- Los modelos continuo alto/quirúrgico regulan a 750 mmHg y están especialmente diseñados para procedimientos quirúrgicos. Proporcionan velocidades de flujo altas apropiadas para la sala de operaciones.
- Los modelos continuo pediátrico y neonatal regulan a 160 mmHg y 100 mmHg con válvulas limitadoras de presión positiva para mayor seguridad.
- Todas las unidades pueden ser mejoradas con succión intermitente y módulos de visualización digitales.

Modelos Continuo/Intermitente - Etiquetas Grises

Continuo/Intermitente para Adultos



SRA-CIU2-F2

Continuo/Intermitente para Pediátrico



SRA-PIU2-F2

Continuo/Intermitente para Neonatal



SRA-NIU2-F2

Los modelos continuo/intermitente de Amico son ideales para todos los ambientes de cuidado intensivo, pero también pueden ser utilizados en todas las áreas de pacientes, ya que son considerados "unidades de combinación". Nuestro módulo intermitente único ofrece una forma confiable y silenciosa de cambiar los niveles de succión de encendido a apagado durante el modo intermitente.

- Los modelos de adulto regulan a 300 mmHg; los modelos pediátricos regulan a 160 mmHg; y los modelos neonatales regulan a 100 mmHg.
- Los modelos pediátricos y neonatales cuentan con válvulas limitadoras de presión positiva para mayor seguridad.
- Los ciclos de secuencia de ENCENDIDO/APAGADO operan de manera independiente y pueden ser programados desde la placa trasera de la unidad, sin necesidad de retirar la cubierta.
- Todas las unidades pueden ser mejoradas con módulos de visualización digitales.

Regulador de Vacío en Ruedas



Características:

- Altura total de 30" (76.2 cm)
- (5) 2" (5.08 cm) ruedas swivel
- Cuerpo de acero inoxidable
- Asa superior para facilitar la movilidad
- Gancho lateral para tubos o mangueras sobrantes
- 2 montajes para la colocación del frasco de succión
- Montículo regulador (VAC DISS ajustada a macho) – disponible para uno o dos reguladores

part#: S-RS-30-DISS-S*

*Los recipientes, portar recipientes, tubos, magueras y regulador de vacío se venden por separado

Accessories:



Trampas de seguridad/vacío



Recipientes desechables y portar recipientes



Recipientes y portar recipientes en autoclave

Diseño Modular Simple

Análogo a Digital




Especificaciones Técnicas

Rendimiento				
Velocidad de flujo	Intermitente:	Adulto: 8 LPM	Pediátrico: 8 LPM	Neonatal: 8 LPM
	Continuo:	Adulto: 65 LPM	Pediátrico: 40 LPM	Neonatal: 40 LPM
Secuencia	• 16 segundos encendido/8 segundos apagado • La secuencia puede ser programada desde la parte trasera de la unidad con acceso a las válvulas de aguja de ENCENDIDO/APAGADO. • Inicia en la posición APAGADO.			
		Precisión del Indicador		
	Rango de Vacío	Análogo	Digital	
Neonatal	0-100 mmHg (13 kPa)	± 3% de la escala completa	± 1% de la escala completa	
Pediátrico	0-160 mmHg (20 kPa)	± 3% de la escala completa	± 1% de la escala completa	
Adulto	0-300 mmHg (40 kPa)	± 3% de la escala completa	± 1% de la escala completa	
Quirúrgico	0-750 mmHg (94 kPa)	± 3% de la escala completa	± 1% de la escala completa	
Características físicas				
Dimensiones	5.94" H x 2.93" W x 4.04" D (15.09 cm x 7.44 cm x 10.26 cm)			
Peso	Continuo: 10 oz (290 g), Intermitente: 13 oz (360 g)			
Batería				
Litio	Dos baterías 2/3 AA, 3.6 V, 1.6 Ah, de litio			


Número de Modelo

SRX-XXXX-XX(X)*

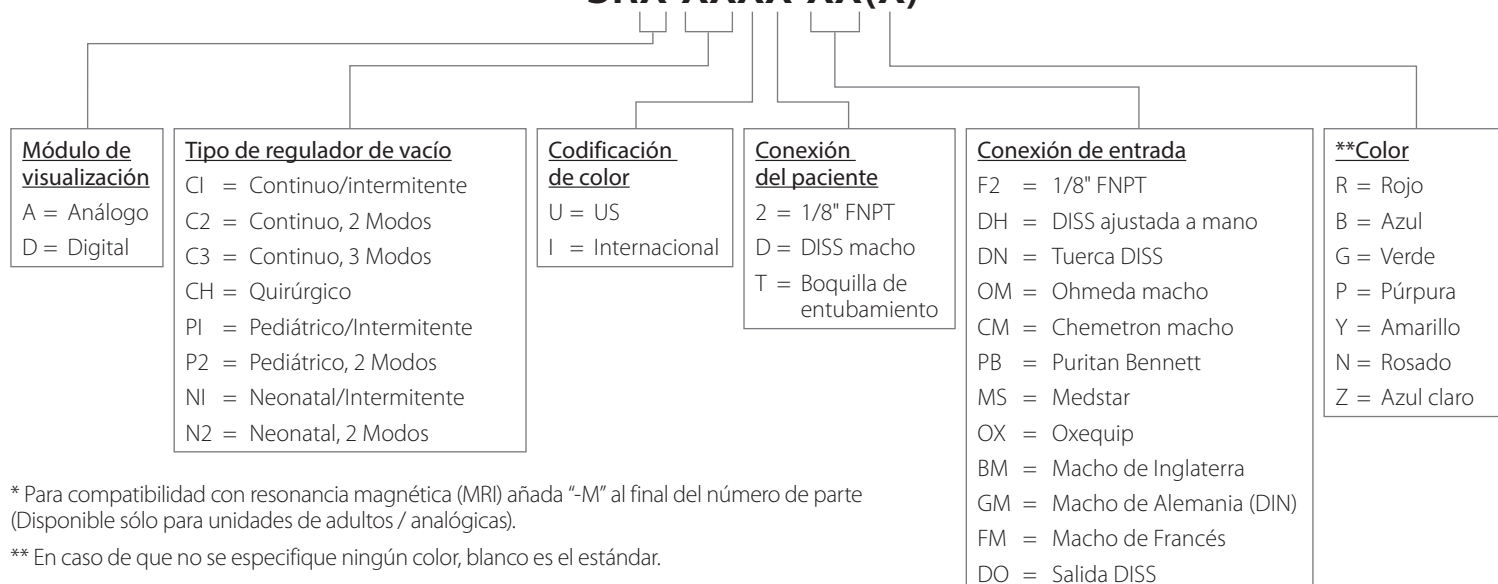

Flujómetros

3 AÑOS
de garantía

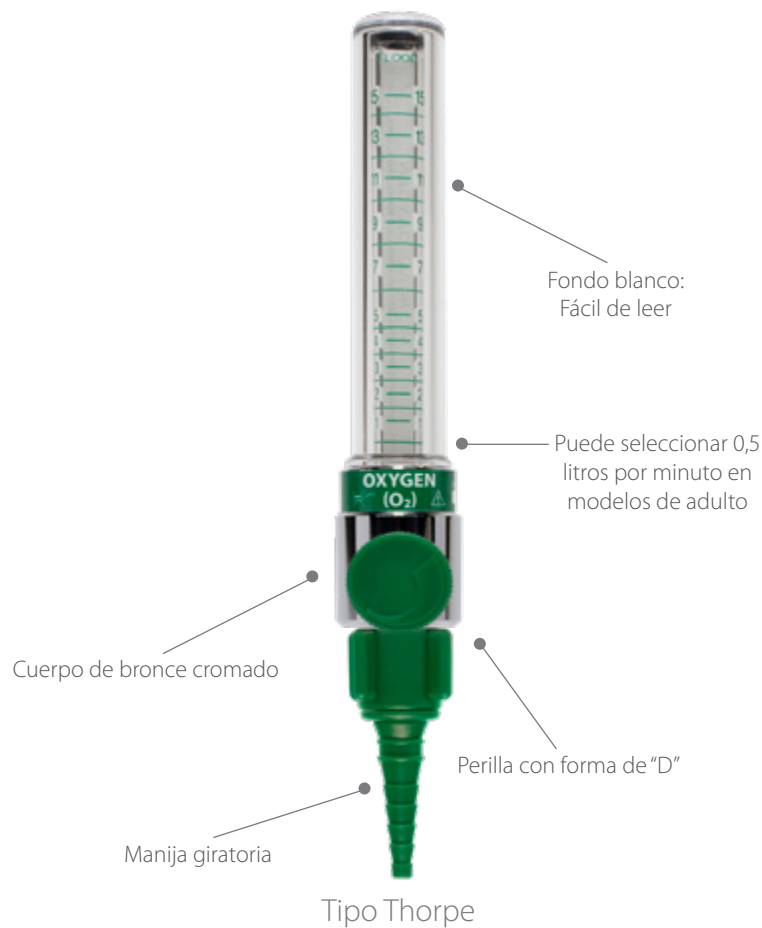

Características:

- Línea completa de Flujómetros, desde modelos neonatales hasta para adultos
- Disponible en tipos Thorpe y dial estándar
- Conexión estándar de 1/8" FNPT, pero también puede ser ajustada con diferentes adaptadores y accesorios para responder a sus necesidades específicas
- Opciones para resonancia magnética (MRI) disponibles
- Disponible en colores US e ISO
- Es el flujómetro con el cuerpo de bronce cromado más pequeño y liviano de la industria
- Tubo interno y etiquetado con codificación de color
- Fácil de mantener
- Perilla en forma de "D" sin bandas
- Incluye un filtro de entrada y una extensión de entrada



Flujómetros con montaje doble o bloque en Y



Doble salida con flujómetros

Flujómetro no removible

Accesorios:



Humidificador reutilizable



Humidificador desechable



Conexiones giratorias/
tipo árbol de Navidad



Toma de potencia

Diseño Tipo Dial



Flujómetros tipo dial para oxígeno



Flujómetros tipo dial para aire medicinal

Características:

- Disponible para oxígeno en 25, 15, 8 y 4 LPM
- Disponible para aire médico en 25 y 15 LPM
- El más pequeño y liviano de la industria
- El incremento más pequeño es 1/32
- Etiquetas con codificación de color para gases específicos
- Protegido por una cubierta de aluminio anodizado
- Ventana fácil de leer


Especificaciones Técnicas del Tipo Thorpe

Características físicas				
Dimensiones	5.6" H x 2.7" W (14.22 cm x 6.86 cm)			
Peso	6 oz (170 g)			
Rango de flujo	Oxígeno:	0 - 70 LPM	Aire Medicinal:	0 - 70 LPM
		0 - 15 LPM		0 - 15 LPM
		0 - 8 LPM		
		0 - 3.5 LPM		
		0 - 1 LPM		
		0 - 200 CC		
• Presión trasera compensada para que la exactitud del flujo no se vea afectada por las restricciones • Calibrado a 50 psi • Serializado para facilitar la identificación				

Especificaciones Técnicas del Tipo Dial

Rango de flujo	Oxígeno:	0 - 25 LPM	0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
		0 - 15 LPM	0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15
		0 - 8 LPM	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8
		0 - 4 LPM	0, 0.03, 0.06, 0.12, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4
	Aire Medicinal:	0 - 15 LPM	0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15
		0 - 25 LPM	0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
• Calibrado a 50 psi • Serializado para facilitar la identificación			

Número de Modelo FMX-XXY-XX(YY)*

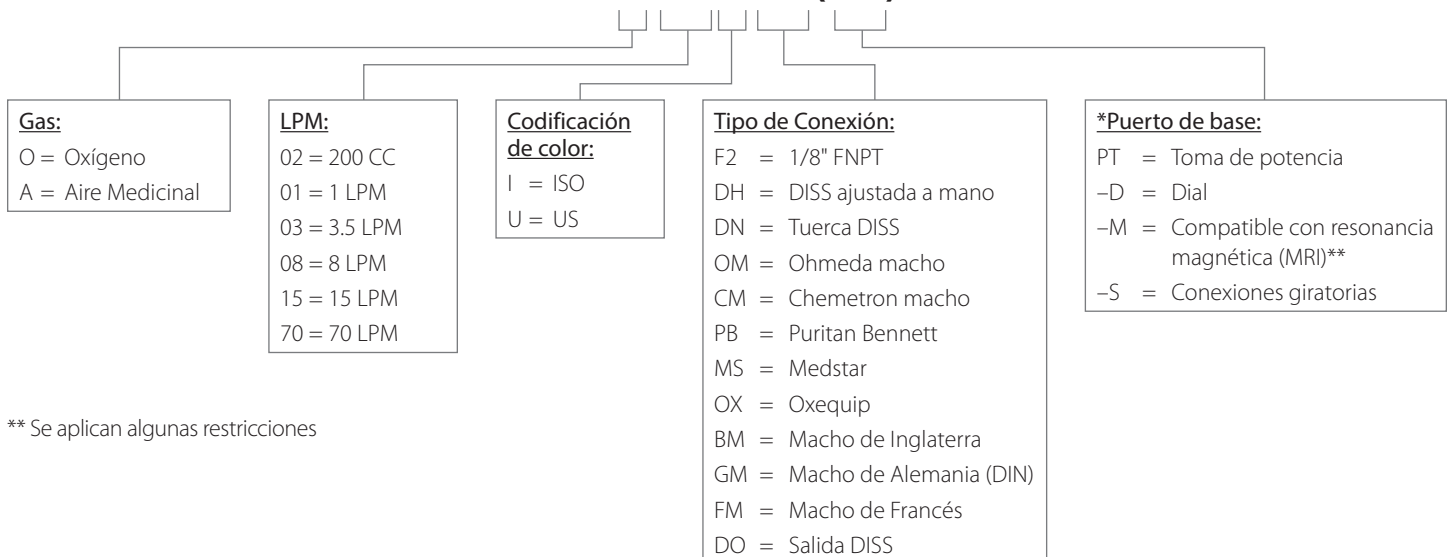

** Se aplican algunas restricciones

Adaptadores OHMEDA

	 OXÍGENO	 AIRE MEDICINAL	 VACÍO	 N ₂ O	 EVACUACIÓN	 CO ₂
 NPT macho de 1/8"	S-AD-OHUO-M2	S-AD-OHUA-M2	S-AD-OHUV-M2	S-AD-OHU2-M2	S-AD-OHUW-M2	S-AD-OHUC-M2
 Conector de manguera de 1/4" y 5/16"	S-AD-OHUO-HB4	S-AD-OHUA-HB4	S-AD-OHUV-HB4 S-AD-OHUV-HB5	S-AD-OHU2-HB4	S-AD-OHUW-HB4 S-AD-OHUW-HB5	S-AD-OHUC-HB4
 DISS macho	S-AD-OHUO-DM	S-AD-OHUA-DM	S-AD-OHUV-DM	S-AD-OHU2-DM	S-AD-OHUW-DM	S-AD-OHUC-DM
 NPT macho de 1/4"	S-AD-OHUO-M4	S-AD-OHUA-M4	S-AD-OHUV-M4	S-AD-OHU2-M4	S-AD-OHUW-M4	S-AD-OHUC-M4
 NPT hembra de 1/8"	S-AD-OHUO-F2	S-AD-OHUA-F2	S-AD-OHUV-F2	S-AD-OHU2-F2	S-AD-OHUW-F2	S-AD-OHUC-F2
 DISS ajustada a mano	S-AD-OHUO-DH	S-AD-OHUA-DH	S-AD-OHUV-DH	S-AD-OHU2-DH	S-AD-OHUW-DH	S-AD-OHUC-DH
 Tuerca y boquilla DISS	S-AD-OHUO-DN	S-AD-OHUA-DN	S-AD-OHUV-DN	S-AD-OHU2-DN	S-AD-OHUW-DN	S-AD-OHUC-DN

Reemplace la "U" con "I" para los colores de ISO - solo oxígeno, aire medicinal y vacío.

Acoples OHMEDA

						
	OXÍGENO	AIRE MEDICINAL	VACÍO	N ₂ O	EVACUACIÓN	CO ₂
 NPT macho de 1/8"	S-CO-OHUO-M2	S-CO-OHUA-M2	S-CO-OHUV-M2	S-CO-OHU2-M2	S-CO-OHUW-M2	S-CO-OHUG-M2
 Conector de manguera de 1/4" y 5/16"	S-CO-OHUO-HB4	S-CO-OHUA-HB4	S-CO-OHUV-HB4 S-CO-OHUV-HB5	S-CO-OHU2-HB4	S-CO-OHUW-HB4 S-CO-OHUW-HB5	S-CO-OHUG-HB4
 DISS macho	S-CO-OHUO-DM	S-CO-OHUA-DM	S-CO-OHUV-DM	S-CO-OHU2-DM	S-CO-OHUW-DM	S-CO-OHUG-DM
 NPT macho de 1/4"	S-CO-OHUO-M4	S-CO-OHUA-M4	S-CO-OHUV-M4	S-CO-OHU2-M4	S-CO-OHUW-M4	S-CO-OHUG-M4
 NPT hembra de 1/8"	S-CO-OHUO-F2	S-CO-OHUA-F2	S-CO-OHUV-F2	S-CO-OHU2-F2	S-CO-OHUW-F2	S-CO-OHUG-F2
 DISS ajustada a mano	S-CO-OHUO-DH	S-CO-OHUA-DH	S-CO-OHUV-DH	S-CO-OHU2-DH	S-CO-OHUW-DH	S-CO-OHUG-DH
 Tuerca y boquilla DISS	S-CO-OHUO-DN	S-CO-OHUA-DN	S-CO-OHUV-DN	S-CO-OHU2-DN	S-CO-OHUW-DN	S-CO-OHUG-DN

Reemplace la "U" con "I" para los colores de ISO - solo oxígeno, aire medicinal y vacío.

Adaptadores CHEMETRON

	 OXÍGENO	 AIRE MEDICINAL	 VACÍO	 N ₂ O	 EVACUACIÓN	 CO ₂
 NPT macho de 1/8"	S-AD-CHUO-M2	S-AD-CHUA-M2	S-AD-CHUV-M2	S-AD-CHU2-M2	S-AD-CHUW-M2	S-AD-CHUG-M2
 Conector de manguera de 1/4" y 5/16"	S-AD-CHUO-HB4	S-AD-CHUA-HB4	S-AD-CHUV-HB4 S-AD-CHUV-HB5	S-AD-CHU2-HB4	S-AD-CHUW-HB4 S-AD-CHUW-HB5	S-AD-CHUG-HB4
 DISS macho	S-AD-CHUO-DM	S-AD-CHUA-DM	S-AD-CHUV-DM	S-AD-CHU2-DM	S-AD-CHUW-DM	S-AD-CHUG-DM
 NPT macho de 1/4"	S-AD-CHUO-M4	S-AD-CHUA-M4	S-AD-CHUV-M4	S-AD-CHU2-M4	S-AD-CHUW-M4	S-AD-CHUG-M4
 NPT hembra de 1/8"	S-AD-CHUO-F2	S-AD-CHUA-F2	S-AD-CHUV-F2	S-AD-CHU2-F2	S-AD-CHUW-F2	S-AD-CHUG-F2
 DISS ajustada a mano	S-AD-CHUO-DH	S-AD-CHUA-DH	S-AD-CHUV-DH	S-AD-CHU2-DH	S-AD-CHUW-DH	S-AD-CHUG-DH
 Tuerca y boquilla DISS	S-AD-CHUO-DN	S-AD-CHUA-DN	S-AD-CHUV-DN	S-AD-CHU2-DN	S-AD-CHUW-DN	S-AD-CHUG-DN

Reemplace la "U" con "I" para los colores de ISO - solo oxígeno, aire medicinal y vacío.

Acoples CHEMETRON

	 OXÍGENO	 AIRE MEDICINAL	 VACÍO	 N ₂ O	 EVACUACIÓN	 CO ₂
 NPT macho de 1/8"	S-CO-CHUO-M2	S-CO-CHUA-M2	S-CO-CHUV-M2	S-CO-CHU2-M2	S-CO-CHUW-M2	S-CO-CHUG-M2
 Conector de manguera de 1/4" y 5/16"	S-CO-CHUO-HB4	S-CO-CHUA-HB4	S-CO-CHUV-HB4 S-CO-CHUV-HB5	S-CO-CHU2-HB4	S-CO-CHUW-HB4 S-CO-CHUW-HB5	S-CO-CHUG-HB4
 DISS macho	S-CO-CHUO-DM	S-CO-CHUA-DM	S-CO-CHUV-DM	S-CO-CHU2-DM	S-CO-CHUW-DM	S-CO-CHUG-DM
 NPT macho de 1/4"	S-CO-CHUO-M4	S-CO-CHUA-M4	S-CO-CHUV-M4	S-CO-CHU2-M4	S-CO-CHUW-M4	S-CO-CHUG-M4
 NPT hembra de 1/8"	S-CO-CHUO-F2	S-CO-CHUA-F2	S-CO-CHUV-F2	S-CO-CHU2-F2	S-CO-CHUW-F2	S-CO-CHUG-F2
 DISS ajustada a mano	S-CO-CHUO-DH	S-CO-CHUA-DH	S-CO-CHUV-DH	S-CO-CHU2-DH	S-CO-CHUW-DH	S-CO-CHUG-DH
 Tuerca y boquilla DISS	S-CO-CHUO-DN	S-CO-CHUA-DN	S-CO-CHUV-DN	S-CO-CHU2-DN	S-CO-CHUW-DN	S-CO-CHUG-DN

Reemplace la "U" con "I" para los colores de ISO - solo oxígeno, aire medicinal y vacío.

Adaptadores y Acoples de Puritan Bennett

	OXÍGENO	AIRE MEDICINAL	VACÍO	N ₂ O	EVACUACIÓN
 NPT MACHO DE 1/8"	S-AD-PBUO-M2 S-CO-PBUO-M2	S-AD-PBUA-M2 S-CO-PBUA-M2	S-AD-PBUV-M2 S-CO-PBUV-M2	S-AD-PBU2-M2 S-CO-PBU2-M2	S-AD-PBUW-M2 S-CO-PBUW-M2
 CONECTOR DE MANGUERA DE 1/4" Y 5/16"	S-AD-PBUO-HB4 S-CO-PBUO-HB4	S-AD-PBUA-HB4 S-CO-PBUA-HB4	S-AD-PBUV-HB4 S-AD-PBUV-HB5 S-CO-PBUV-HB4 S-CO-PBUV-HB5	S-AD-PBU2-HB4 S-CO-PBU2-HB4	S-AD-PBUW-HB4 S-AD-PBUW-HB5 S-CO-PBUW-HB4 S-CO-PBUW-HB5
 NPT MACHO DE 1/4"	S-AD-PBUO-M4 S-CO-PBUO-M4	S-AD-PBUA-M4 S-CO-PBUA-M4	S-AD-PBUV-M4 S-CO-PBUV-M4	S-AD-PBU2-M4 S-CO-PBU2-M4	S-AD-PBUW-M4 S-CO-PBUW-M4
 NPT HEMBRA DE 1/8"	S-AD-PBUO-F2 S-CO-PBUO-F2	S-AD-PBUA-F2 S-CO-PBUA-F2	S-AD-PBUV-F2 S-CO-PBUV-F2	S-AD-PBU2-F2 S-CO-PBU2-F2	S-AD-PBUW-F2 S-CO-PBUW-F2

Reemplace la "U" con "I" para los colores de ISO - solo oxígeno y aire medicinal.

Adaptadores y Acoples de Schrader

	OXÍGENO	AIRE MEDICINAL	VACÍO	N ₂ O	NITROGENO
 NPT MACHO DE 1/8"	S-AD-SHUO-M2 S-CO-SHUO-M2	S-AD-SHUA-M2 S-CO-SHUA-M2	S-AD-SHUV-M2 S-CO-SHUV-M2	S-AD-SHU2-M2 S-CO-SHU2-M2	S-AD-SHUN-M2 S-CO-SHUN-M2
 CONECTOR DE MANGUERA DE 1/4" Y 5/16"	S-AD-SHUO-HB4 S-CO-SHUO-HB4	S-AD-SHUA-HB4 S-CO-SHUA-HB4	S-AD-SHUV-HB4 S-AD-SHUV-HB5 S-CO-SHUV-HB4 S-CO-SHUV-HB5	S-AD-SHU2-HB4 S-CO-SHU2-HB4	S-AD-SHUN-HB4 S-CO-SHUN-HB4
 NPT MACHO DE 1/4"	S-AD-SHUO-M4 S-CO-SHUO-M4	S-AD-SHUA-M4 S-CO-SHUA-M4	S-AD-SHUV-M4 S-CO-SHUV-M4	S-AD-SHU2-M4 S-CO-SHU2-M4	S-AD-SHUN-M4 S-CO-SHUN-M4
 NPT HEMBRA DE 1/8"	S-AD-SHUO-F2 S-CO-SHUO-F2	S-AD-SHUA-F2 S-CO-SHUA-F2	S-AD-SHUV-F2 S-CO-SHUV-F2	S-AD-SHU2-F2 S-CO-SHU2-F2	S-AD-SHUN-F2 S-CO-SHUN-F2

Reemplace la "U" con "I" para los colores de ISO - solo oxígeno y aire medicinal.

Adaptadores de Oxequip y Medstar

	OXÍGENO	AIRE MEDICINAL	VACÍO	N ₂ O
OXEQUIP NPT MACHO DE 1/8" OXEQUIP 	S-AD-OXUO-M2	S-AD-OXUA-M2	S-AD-OXUV-M2	S-AD-OXU2-M2
OXEQUIP CONECTOR DE MANGUERA DE 1/4" Y 5/16" OXEQUIP 	S-AD-OXUO-HB4	S-AD-OXUA-HB4	S-AD-OXUV-HB4 S-AD-OXUV-HB5	S-AD-OXU2-HB4
MEDSTAR NPT MACHO DE 1/8" MEDSTAR 	S-AD-MSUO-M2	S-AD-MSUA-M2	S-AD-MSUV-M2	S-AD-MSU2-M2
MEDSTAR CONECTOR DE MANGUERA DE 1/4" Y 5/16" MEDSTAR 	S-AD-MSUO-HB4	S-AD-MSUA-HB4	S-AD-MSUV-HB4 S-AD-MSUV-HB5	S-AD-MSU2-HB4

Reemplace la "U" con "I" para los colores de ISO - solo oxígeno y aire medicinal.

Conectores DISS

		OXÍGENO	AIRE MEDICINAL	VACÍO	N ₂ O	NITROGENO	EVACUACIÓN	CO ₂	AIRE DE INSTRUMENTO
NPT MACHO DE 1/8"		S-BA-O-M2	S-BA-A-M2	S-BA-V-M2	S-BA-2-M2	S-BA-N-M2	S-BA-W-M2	S-BA-C-M2	S-BA-I-M2
		S-DA-15O-M2-DN	S-DA-15A-M2-DN	S-DA-15V-M2-DN	S-DA-152-M2-DN	S-DA-15N-M2-DN	S-DA-15W-M2-DN	S-DA-15C-M2-DN	S-DA-15I-M2-DN
		S-DA-15UO-M2-DH	S-DA-15UA-M2-DH	S-DA-15UV-M2-DH	S-DA-15U2-M2-DH	S-DA-15UN-M2-DH	S-DA-15UW-M2-DH	S-DA-15UC-M2-DH	S-DA-15UI-M2-DH
CONECTOR DE MANGUERA DE 1/4" & 5/16"		S-BA-O-HB4	S-BA-A-HB4	S-BA-V-HB4 S-BA-V-HB5	S-BA-2-HB4	S-BA-N-HB4	S-BA-W-HB4 S-BA-W-HB5	S-BA-C-HB4	S-BA-I-HB4
		S-DA-HB4-O-DN	S-DA-HB4-A-DN	S-DA-HB4-V-DN S-DA-HB5-V-DN	S-DA-HB4-2-DN	S-DA-HB4-N-DN	S-DA-HB4-W-DN S-DA-HB5-W-DN	S-DA-HB4-C-DN	S-DA-HB4-I-DN
		S-DA-HB4-UO-DH	S-DA-HB4-UA-DH	S-DA-HB4-UV-DH S-DA-HB5-UV-DH	S-DA-HB4-U2-DH	S-DA-HB4-UN-DH	S-DA-HB4-UW-DH S-DA-HB5-UW-DH	S-DA-HB4-UC-DH	S-DA-HB4-UI-DH
NPT MACHO DE 1/4"		S-BA-O-M4	S-BA-A-M4	S-BA-V-M4	S-BA-2-M4	S-BA-N-M4	S-BA-W-M4	S-BA-C-M4	S-BA-I-M4
		S-DA-15O-M4-DN	S-DA-15A-M4-DN	S-DA-15V-M4-DN	S-DA-152-M4-DN	S-DA-15N-M4-DN	S-DA-15W-M4-DN	S-DA-15C-M4-DN	S-DA-15I-M4-DN
		S-DA-15UO-M4-DH	S-DA-15UA-M4-DH	S-DA-15UV-M4-DH	S-DA-15U2-M4-DH	S-DA-15UN-M4-DH	S-DA-15UW-M4-DH	S-DA-15UC-M4-DH	S-DA-15UI-M4-DH
NPT HEMBRA DE 1/8"		S-BA-O-F2	S-BA-A-F2	S-BA-V-F2	S-BA-2-F2	S-BA-N-F2	S-BA-W-F2	S-BA-C-F2	S-BA-I-F2
		S-DA-15O-F2-DN	S-DA-15A-F2-DN	S-DA-15V-F2-DN	S-DA-152-F2-DN	S-DA-15N-F2-DN	S-DA-15W-F2-DN	S-DA-15C-F2-DN	S-DA-15I-F2-DN
		S-DA-15UO-F2-DH	S-DA-15UA-F2-DH	S-DA-15UV-F2-DH	S-DA-15U2-F2-DH	S-DA-15UN-F2-DH	S-DA-15UW-F2-DH	S-DA-15UC-F2-DH	S-DA-15UI-F2-DH

Reemplace la "U" con "I" para los colores de ISO - solo oxígeno, aire medicinal y vacío.

Conectores Internacionales

  JAPONÉS/COREANO	  ALEMANIA/DIN	  SONDA INGLESA/BOC
  FRANCÉS/AFNOR	  AUSTRALIANO/SIS	

Los conectores anteriores están disponibles para todos los gases. Comuníquese con nosotros si está interesado en nuestras opciones condicionales de resonancia magnética (MRI).

Conectores NPT

CONECTOR DE MANGUERA HEMBRA		CONECTOR DE MANGUERA MACHO		CODO DE CALLE DE 45 GRADOS	
CONECTOR		CONECTOR EN T MACHO/HEMBRA		CONECTOR EN T PARA TUBO	
CONECTOR EN CRUZ HEMBRA		BOQUILLA HEXAGONAL		COUPLER	
CONECTOR EN T HEMBRA		CODO MACHO/HEMBRA DE 90 GRADOS		TAPA	
CODO DE 90 GRADOS		TAPÓN		BOQUILLA PARA TUBERÍA	

www.amico.com



Amico Patient Care Corporation | 122 East Beaver Creek Road, Richmond Hill, ON L4B 1G6, Canada
Teléfono gratuito: 1.877.462.6426 | Teléfono: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862
Email: info@amico.com | www.amico.com

Represented By: