



Analizador de inmunocromatografía de fluorescencia

Analizador VIM 1000

Cuantitativo, Confiable Y Rapido

VivaChek™



Pasos para el proceso

Con una muestra pequeña (sangre, orina, etc.), el analizador VivaDiag TM POCT VIM1000 brinda resultados confiables en solo unos minutos.

Muestra de sangre u orina

Mezclar la muestra con el buffer

Agregue la muestra mezclada

Inserte el dispositivo en el analizador

Muestra de cabello

Cortar el cabello y preparar la muestra de prueba

Agregue la muestra mezclada

Inserte el dispositivo en el analizador



Especificación

Analizador	Specification
Modelo	VIM1000
Dimensiones	280 x 240 x 130 mm
Peso	2.5 kg
Pantalla	7" LCD touch screen
Tipo de Muestra	Sangre total / Suero / Plasma / Orina / Cabello
Identificación de Código de Barras	2D
Operación	5-40°C
Temperatura de Almacenamiento	-10-40°C
Temperatura de Humedad Relativa	20-90%
Conectividad	RS232 & USB & COM
Impresora	Impresora térmica incorporada
Memoria	50000 resultados de la prueba



Advanced Features



Pantalla táctil



Lector de código de barras



Operación simple



Excelente comparabilidad



Pequeño volumen de muestra







Rápida y confiable



Rendimiento Clínico

Precisión

Un estudio clínico reciente ha demostrado una muy buena correlación entre los resultados del analizador VivaDiag TM POCT VIM1000 y el analizador de marca líder.

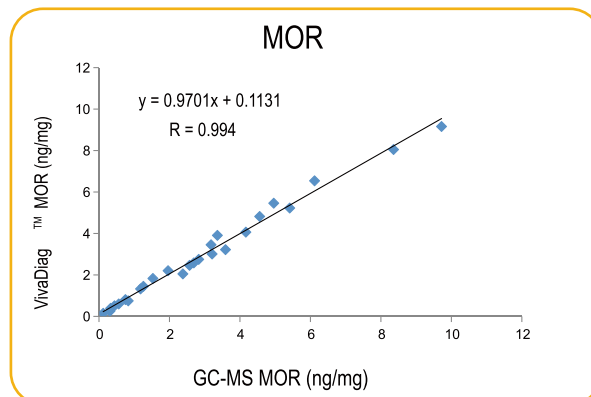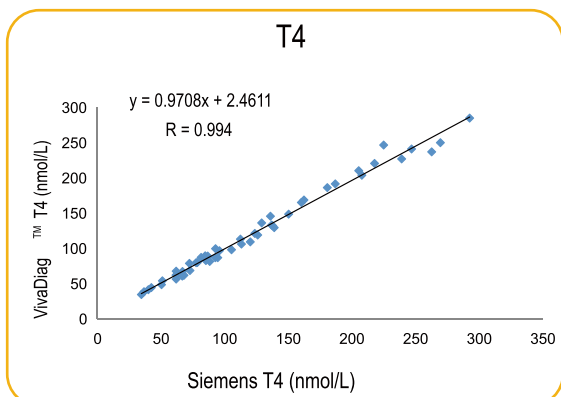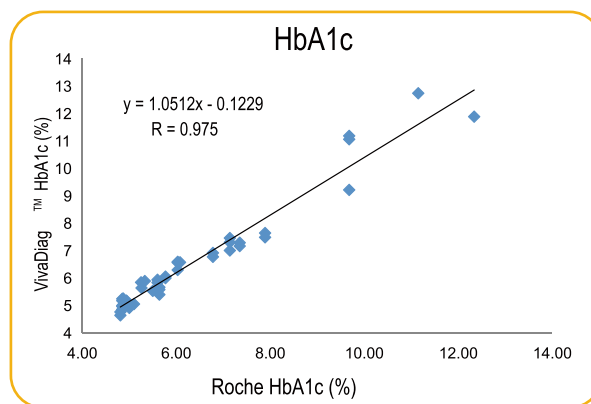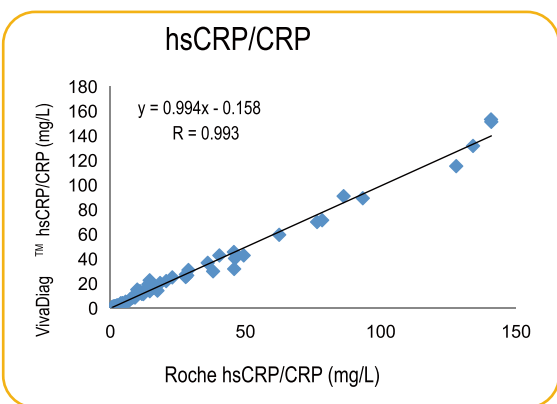



PRUEBAS DISPONIBLES

Grupo	No.Catalogo	Prueba	Muestra	Tiempo de reacción	Rangos de medidas
Marcador Cardíaco	VID09-03-011	CTN-I	WB/S/P	15 min	0.1-50 ng/mL
	VID10-03-011	CK-MB	WB/S/P	15 min	0.3-100 ng/mL
	VID11-03-011	D-Dimer	WB/P	10 min	0.1-10 µg/mL
	VID12-03-011	MYO	WB/S/P	15 min	2-400 ng/mL
	VID13-03-011	H-FABP	WB/S/P	15 min	1-120 ng/mL
	VID14-03-011	NT-ProBNP	WB/S/P	15 min	18-35,000 pg/mL
	VID15-03-011	Combo (CTN-I/CK-MB/MYO)	WB/S/P	15 min	Same as single item
	VID45-03-011	Combo (CTN-I/CK-MB)	WB/S/P	15 min	Same as single item
Infección	VID01-01-011	hsCRP/CRP	WB/S/P	3 min	0.5-200 mg/L
	VID02-01-011	PCT	WB/S/P	10 min	0.1-50 ng/mL
	VID04-01-011	SAA	WB/S/P	10 min	5-100 mg/L
	VID05-01-011	IL-6	WB/S/P	10 min	2-4,000 pg/mL
Funcion Renal	VID03-02-011	CYS C	WB/S/P	3 min	0.5-10 mg/L
	VID06-02-011	MAU	U	3 min	10-200 mg/L
	VID07-02-011	β2-MG	WB/S/P	3 min	0.5-20 mg/L
	VID08-02-011	NGAL	WB/S/P	3 min	25-1,600 ng/mL
Diabetes	VID16-04-011	HbA1c	WB	5 min	4-16%
Hormonas	VID19-05-011	β-hCG	S/P	15 min	5-10,000 mIU/mL
	VID20-05-011	TSH	WB/S/P	15 min	0.1-100 mIU/L
	VID21-05-011	T3	S/P	10 min	0.61-10.00 nmol/L
	VID22-05-011	T4	S/P	15 min	20-310 nmol/L
	VID23-05-011	LH	WB/S/P	10 min	1-200 mIU/mL
Droga de abuso	VID37-09-011	MOR	H	5 min	0.10-10.00 ng/mg
	VID38-09-011	MET	H	5 min	0.10-10.00 ng/mg
	VID39-09-011	KET	H	5 min	0.10-10.00 ng/mg
	VID46-09-011	Combo (MOR/MET/KET)	H	5 min	Same as single item
Otros	VID28-07-011	FER	S/P	10 min	5-1,500 ng/mL

Próximos elementos

Grupo	No.Catalogo	Prueba	Muestra	Tiempo de reacción	Rangos de medidas
Marcador Tumoral	VID24-06-011	PSA	S/P	10 min	2-100 ng/mL
	VID25-06-011	AFP	S/P	10 min	5-400 ng/mL
	VID26-06-011	CEA	S/P	10 min	1-500 ng/mL
	VID27-06-011	iFOB	F	10 min	25-1,000 ng/mL
Diabetes	VID17-04-011	C-P	WB/S/P	10 min	0.4-20 ng/mL
	VID18-04-011	INS	WB/S/P	10 min	0.5-100 mIU/L
Droga de abuso	VID40-09-011	THC	H	5 min	0.02-2.0 ng/mg
	VID41-09-011	COC	H	5 min	0.20-10.00 ng/mg

WB=Sangre total; S=Suero; P=Plasma; F=Hece; U=Orina; min=minutos; H=Cabello